


Serie 6000C de tela

Sensores de tela desechables

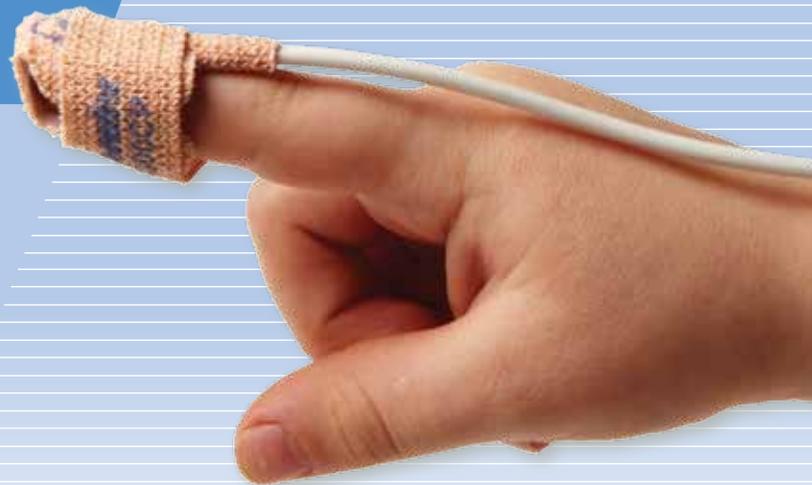

Tela transpirable para mayor comodidad del paciente

La serie 6000 de tela de Nonin está diseñada con un cable, sensor y envoltura de tela adhesiva, y ofrece máxima comodidad para los pacientes que requieran una monitorización prolongada y aplicación segura del sensor. Este sensor desechable está diseñado con una tela elástica a prueba de rasgaduras que facilita su colocación y ajuste, especialmente en pacientes que presentan mayor dificultad de ajuste (por ej., bebés y recién nacidos). Gracias a la aplicación adecuada del sensor, se garantiza la uniformidad de las lecturas. Los sensores desechables de la serie 6000 con la tecnología comprobada PureLight®, combinados con el procesamiento de señal PureSAT® de Nonin, ofrecen resultados constantes de paciente a paciente y de sensor a sensor, incluso en condiciones difíciles tales como presencia de movimiento o baja perfusión.

Serie 6000C de tela

Características principales del producto

- **Material de tela:** transpirable, para comodidad del paciente
- **Material elástico:** fácil de colocar y ajustar, mantiene el sensor en su posición adecuada
- **A prueba de rasgaduras:** aumenta el número de veces que el sensor puede ser cambiado de posición
- **Disponible en una variedad de tamaños:** de adulto a recién nacido
- **Sin látex**



Seleccione el tamaño

6000CA
Adulto



(> 30 kg / > 66 lb)

6000CP
Pediátrico



(> 10 kg / > 22 lb)

6000CI
Infantil



(2-20 kg / 2,2-44 lb)

6000CN
Neonatal



Neonatal (< 2 kg / < 4,4 lb)
Adulto (> 30 kg / > 66 lb)

Todos los sensores están embalados en cajas de 24 unidades. **Para uso exclusivo con pulsioximetría de la marca Nonin.**

Ventajas clave del producto

- Diseño todo incluido con guía ilustrada de cómo aplicar el sensor al dedo, lo cual garantiza al asistente del paciente o al propio paciente una aplicación fácil y precisa.
- Ideal para situaciones con alto riesgo de contaminación cruzada.
- El adhesivo especial permite cambiar la posición del sensor múltiples veces.
- Los LED PureLight® se seleccionan meticulosamente a partir de una longitud de onda especificada y de la intensidad de la luz. Están exentos de emisiones secundarias (contaminación) y eliminan las variaciones en las lecturas de paciente a paciente y de sensor a sensor.
- Cumple con todos los requisitos de las normas reglamentarias y de calidad.

Especificaciones*

Precisión de SpO₂ (A_{rms}**)	70 – 100%
Adulto, pediátrico, infantil	± 2 dígitos
Con movimiento	± 3 dígitos***
Neonatal	± 3 dígitos
Precisión de baja perfusión de SpO₂ (A_{rms}**)	70 – 100% ± 2 dígitos
Precisión de la frecuencia del pulso (A_{rms}**)	18 – 321 latidos por minuto (lpm)
Adulto, pediátrico, infantil	± 2 dígitos
Neonatal	± 3 dígitos

Precisión de la frecuencia del pulso con baja perfusión (A_{rms})**

40 – 240 lpm ± 2 dígitos

Este producto cumple con ISO 10993-1.


*Consulte las instrucciones de uso del producto para obtener más información sobre las especificaciones y pruebas del producto.

** ±1 A_{rms} abarca al 68% de la población. Esta información es especialmente útil para el personal clínico que realiza terapia fotodinámica.

*** Las declaraciones de movimiento son sólo para los tamaños de adulto, pediátrico e infantil. Las especificaciones de exactitud están basadas en pruebas con los modelos 2500/2500A y 9600.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Distribuidor autorizado:



Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN ■ 55441-5443 ■ EE. UU.
Tel. +1.763.553.9968
Fax +1.763.577.5521
Correo electrónico info@nonin.com
www.nonin.com

Nonin Medical AB
Fibervägen 2, 82450
Hudiksvall, Suecia
Tel. +46.650.401500
Fax +46.650.401514
Correo electrónico infointl@nonin.se